

GAM Recovery Botas de Compresión

Core Series



Manual de Usuario

Lea este manual cuidadosamente antes de usar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1 **Uso General**

- Este producto es solo para uso personal y no es un instrumento médico ni para uso comercial.
- Use el producto solo para el propósito descrito en el manual.
- El producto está diseñado para el uso de una sola persona a la vez.
- Los niños o personas sin experiencia deben ser supervisados por un adulto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de bebés, niños y personas que no puedan usarlo de manera independiente.



2 **Seguridad Eléctrica y de Carga**

- No dañe, doble, tire o retuerza el cable de carga.
- Utilice únicamente el cable de carga recomendado para este producto.
- No cargue ni use el producto con las manos húmedas.
- No use el producto si el cable de carga está dañado, si el dispositivo funciona incorrectamente, ha sido caído o ha entrado en contacto con agua.
- Mantenga el puerto de carga limpio y seco.



3 Seguridad en el Uso del Producto

- No toque el producto con objetos afilados.
- No use el producto bajo mantas, almohadas u otras coberturas; asegúrese de una adecuada disipación de calor para evitar sobrecalentamiento, incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- No use el producto en áreas con sustancias corrosivas ni durante la administración de oxígeno.
- No use el producto en ambientes de alta humedad o alta temperatura.
- No use el producto mientras conduce.
- No camine mientras usa el producto.
- Detenga el uso inmediatamente si experimenta incomodidad o dolor intenso.
- No use el producto si el cable de alimentación está dañado, si el producto funciona incorrectamente, ha sido caído o ha entrado en contacto con agua.



4 Consulte a un Médico Antes de Usar

Consulte a un médico antes de usar este producto si se aplica alguna de las siguientes condiciones:

- Durante el embarazo, la menstruación o poco tiempo después del parto.
- Dispositivos médicos electrónicos implantados (por ejemplo, marcapasos).
- Trastornos de circulación sanguínea o trombosis.

- Osteoporosis.
- Infecciones cutáneas.
- Enfermedades cardíacas.
- Heridas o afecciones en la piel.
- Tumores malignos.
- Discapacidades físicas, déficits sensoriales o neurológicos, o falta de experiencia/sentido común (incluyendo niños con enfermedad mental o parálisis física).
- Recibiendo tratamiento médico, o cualquier contraindicación que requiera control médico.
- Fracturas o dislocaciones óseas en o cerca del sitio de aplicación.
- Neuropatía periférica grave o alteraciones sensoriales causadas por diabetes.





5 Mantenimiento y Almacenamiento 🧼

- No modifique, desmonte ni repare el producto sin autorización.
- Después de usar, guarde el producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantenga el producto limpio utilizando una toalla suave y seca.
- Cargue el producto según las instrucciones del manual.



Lista de Contenido del Paquete

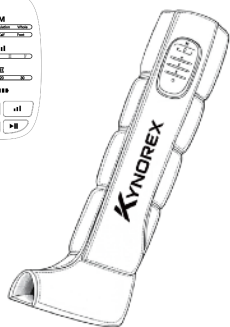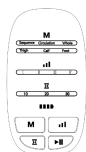


GAM Recovery
Botas de Compresión x 2



Bolsa de
Transporte x 1




Controlador de
Pierna x 2

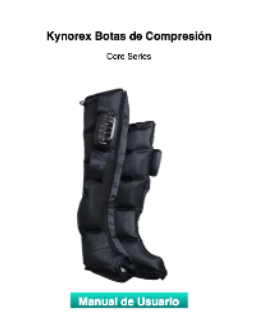

Manual de Usuario
x 1

Unidad de Control

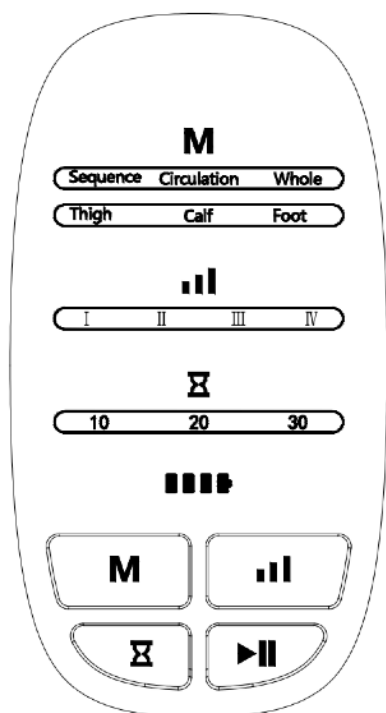

- **M Botón M (Modo)**
Cambia entre 6 modos:
Secuencia – Circulación – Completo – Muslo – Pantorrilla – Pie
- **Botón de Intensidad**
Ajusta el nivel de presión.
Cuatro niveles disponibles: 100/150/200/250 mmHg
- **Botón de Temporizador**
Selecciona la duración de la sesión.
Tres opciones: 10 / 20 / 30 minutos
- **Botón Pausa / Inicio**
Presione una vez para pausar la sesión.
Presione nuevamente para continuar.



Nota:

Cuando el dispositivo está encendido, el icono correspondiente se iluminará en el panel.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Botón lateral de encendido:

Mantenga presionado este botón durante 1,5 segundos para encender el dispositivo.

Presione y mantenga presionado nuevamente durante 1,5 segundos, o detenga todas las acciones de masaje cuando se acabe el tiempo programado; todos los indicadores se apagarán y el sistema entrará en modo de espera.

Tecla M (Modo):

En el estado de inicio, el ícono en el panel se encenderá. Presione la tecla de modo para activar la función de cambio de modo. La conversión de modo se puede realizar de seis maneras: Secuencia – Circulación – Completo – Muslo – Pantorrilla – Pie.

Cuando está cerrado, solo se enciende el ícono y los indicadores correspondientes en el panel Secuencia – Circulación – Completo – Muslo – Pantorrilla – Pie permanecen apagados.

Tecla de intensidad:

En el estado de inicio, el ícono en el panel se encenderá. Presione la tecla de intensidad para activar la función de conversión de presión, que se puede utilizar para la conversión cíclica de intensidad en cuatro niveles: 100-150-200-250 mmHg. El indicador correspondiente en el panel se encenderá en blanco.

Botón Pausa/Iniciar:

En el estado de inicio, presione esta tecla y el producto entrará en estado suspendido. Además, todas las demás teclas de función quedan inactivas. Presione esta tecla nuevamente para que el producto continúe funcionando.

Tecla de temporizador:

En el estado de inicio, el ícono en el panel se encenderá. Presione


la tecla de temporizador para seleccionar entre tres opciones de tiempo: 10, 20 y 30 minutos. El indicador correspondiente en el panel se encenderá en blanco.

✓ Función de memoria

El producto tiene función de memoria: el control principal recordará el estado del modo de trabajo actual (nivel de presión y tiempo) después de encenderse, y lo mantendrá por defecto la próxima vez que se encienda.

🔋 Indicador de batería

- ① Cuando el ícono de la batería disminuye con el nivel de carga, la luz de la cuadrícula se apaga.
- ② Cuando la batería se está cargando, el ícono de la batería se ilumina uno por uno. Detenga la carga cuando la batería esté llena; el indicador mostrará que la luz blanca no parpadea, permanece encendida, y cuando el cable de carga esté completamente conectado, la luz del diagrama de batería se apaga.

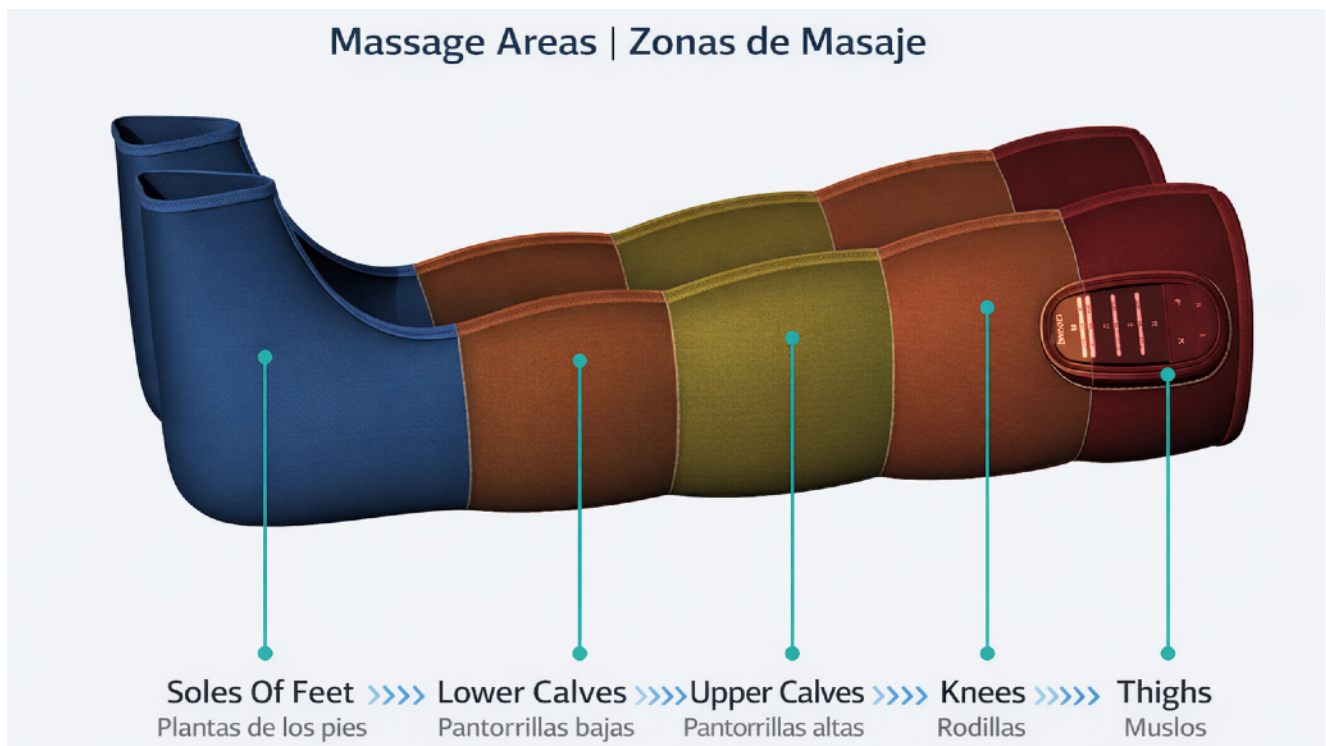

👉 Cómo Elegir un Modo de Masaje

Mode / Modo	Función	Recomendaciones de Uso
M1/ Sequence	Secuencia: Compresión secuencial	Recuperación rápida post-entrenamiento, eliminación de ácido láctico
M2/ Circulation	Circulación: Compresión parcial alterna	Adecuado para piernas cansadas o después de periodos prolongados sentado
M3/ Whole	Completo: Compresión total de la pierna	Mejora la circulación, recuperación de toda la pierna
M4/ Thigh	Muslo: Compresión focal	Alivio localizado de fatiga en muslo y parte superior pierna, post-entrenamiento
M5/ Calf	Pantorrilla: Compresión focal	Alivio localizado de fatiga en pantorrilla, circulación ligera después de ejercicio prolongado
M6/ Foot	Pie y Tobillo: Compresión focal	Alivio localizado de fatiga en pie y tobillo, ideal tras estar de pie largas horas o para mejorar la circulación en los pies

sequence



Circulation



Whole



Thigh



Calf



Foot






Especificaciones del Producto



Modelo Model	Kynorex Core KY501
Presión Pressure	100-150-200-250 mmHg
Temporizador Timer	10 / 20 / 30 min
Charging Port Puerto de carga	Type C Tipo C
Battery Batería	3000mAh / 7.4V
Charging Current Corriente de carga	5V-2A
Inseam Length Longitud de la entrepierna	88 cm (34.64 in)
Upper Thigh Circumference Circunferencia del muslo superior	78 cm (30.71 in)
Peso Product Weight	3.5 KG
Input Voltage	5V

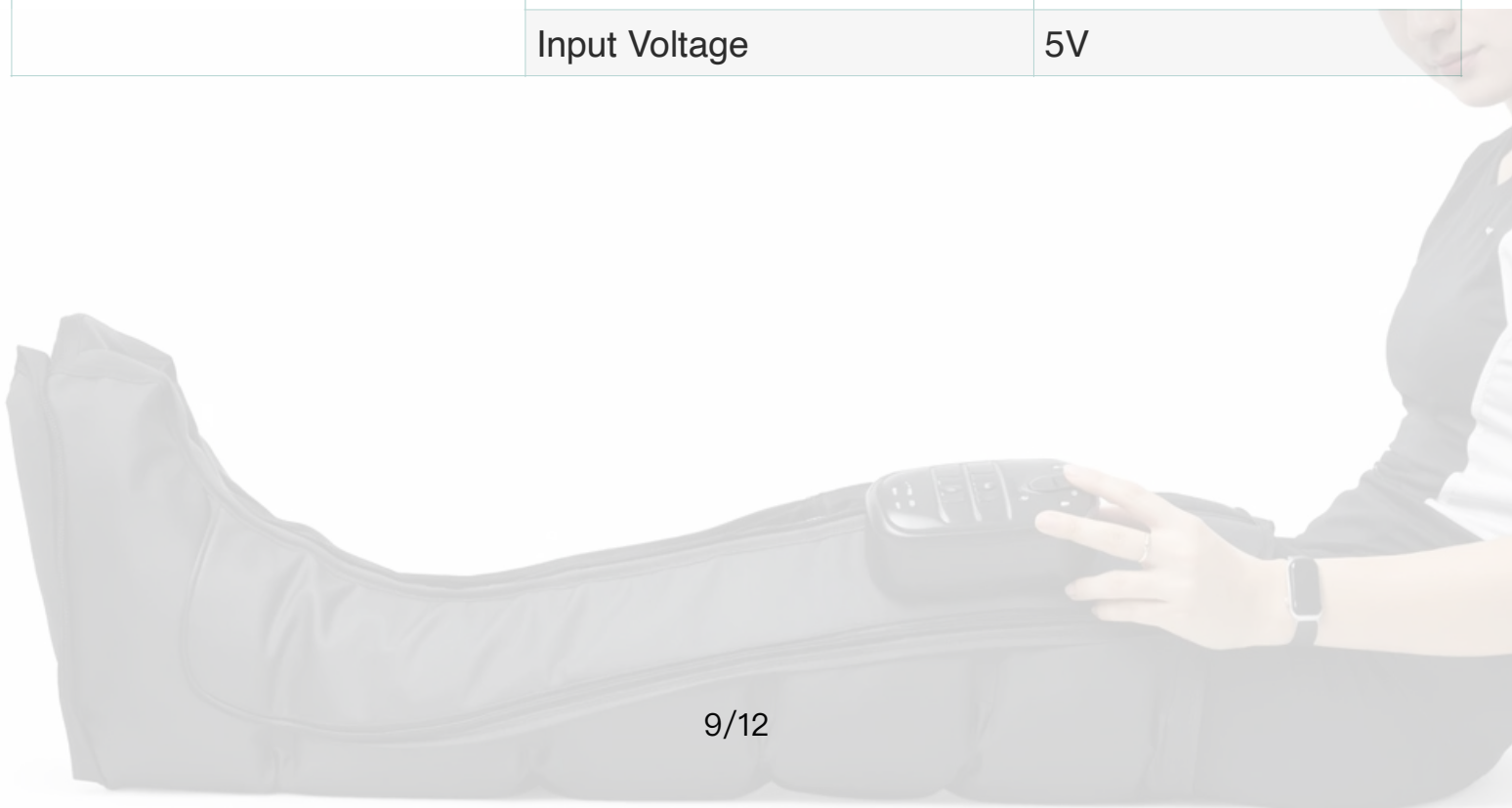



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Limpie la unidad de control, las mangas y las mangueras con un paño limpio y ligeramente húmedo.
- Seque completamente todas las partes con un paño suave antes de usar.
- No permita que polvo, pelusa u objetos extraños entren en las mangueras o conectores.
- Si se acumula polvo, limpie suavemente con un paño seco antes de su uso.
- No utilice gasolina, alcohol, disolventes u otros productos químicos agresivos. Pueden causar daños, decoloración o fallos en el equipo.
- No limpiar en seco.
- Deseche el producto de acuerdo con la normativa local de protección ambiental.



Almacenamiento

- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, alejado de humedad, calor, luz solar directa y agua.
- Si no se va a usar durante un período prolongado, se recomienda cargarlo cada dos meses.



Entorno de uso

- Rango de temperatura: 5 °C ~ 40 °C
- Rango de humedad: 5 % ~ 93 % RH
- Rango barométrico: 86 kPa ~ 105 kPa



Temperature range: 5°C ~ 40°C

Humidity range: 5% ~ 93% RH



Barometric range: 86kPa~105kPa



Almacenamiento y transporte

- Rango de temperatura: 10°C ~ +60°C
- Rango de humedad: 5% ~ 90% RH
- Rango barométrico: 86kPa ~ 105kPa



Temperature range: -10°C
~+60°C

Humidity range: 5% ~ 90% RH



Barometric range: 86kPa~105kPa



ANÁLISIS DE FALLAS Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO

 FENÓMENO	 POSIBLES CAUSAS	 SOLUCIÓN
 El producto no puede iniciar	• Batería del producto agotada • Si el tiempo está configurado, la máquina se apaga automáticamente cuando termina el tiempo	 Cargar durante un período de tiempo antes de encender Reiniciar
 La pantalla muestra el código Er1	• Alarma de sobrevoltaje	 Después del apagado automático y la reducción de voltaje, reiniciar la máquina
 Valor de presión bajo en la pantalla	• Fuga de aire en el producto	 Dentro del período de garantía, comuníquese con el servicio posventa para su revisión



Disponible en Todo el Mundo

Recuperación Inteligente con GAM Recovery

Los sistemas de compresión GAM Recovery están diseñados para apoyar la recuperación muscular y mejorar la circulación después del entrenamiento.

Fabricados bajo estándares de calidad certificados y con suministro global confiable, ofrecemos soluciones profesionales para rendimiento y recuperación.

GAM Recovery — Su socio de confianza en recuperación.