

TERAPIA FRÍA

MANUAL DE USUARIO



Recuperación Portátil y Eficiente
Enfriamiento Rápido y Dirigido
para Músculos y Articulaciones



Terapia Fría
Profesional para
Recuperación en Casa
y Deportes

• KYNOREX SISTEMA DE TERAPIA FRÍA



El Sistema de Terapia Fría Kynorex ayuda a reducir la fatiga muscular, hinchazón y dolor después del deporte, el ejercicio o cualquier actividad física. Es seguro de usar en casa, en gimnasios o durante entrenamientos deportivos.

El sistema incluye prendas de terapia fría no estériles, diseñadas para aplicar frío de forma localizada en diferentes partes del cuerpo, como hombros, caderas, rodillas, pies y tobillos. También se incluye una prenda universal que se adapta a varias zonas. El diseño único de los canales dirige el efecto de enfriamiento con precisión hacia el área deseada, proporcionando una terapia rápida y segura mientras optimiza la distribución de la temperatura, el aislamiento y la comodidad.

Disponible en versiones no estériles para un uso seguro y práctico.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Portátil	Sistema compacto y ligero, ideal para usar en casa o después del entrenamiento.
Cómodo y Práctico	Regula automáticamente la temperatura para una terapia de frío constante sin necesidad de ajustes manuales.
Sencillo	La pantalla LCD intuitiva y los controles muestran el tiempo restante de la sesión y la temperatura actual, facilitando el seguimiento de la recuperación.
Confortable	Las prendas ajustables, hechas de tela suave y transpirable, aseguran un enfriamiento uniforme, comodidad y ajuste preciso en diferentes zonas del cuerpo.



• Vista Superior



• Vista Frontal



• Tubo de Extensión



• Prendas

• ESPECIFICACIONES



Serie	CryoVibe-V1
Tamaño	300(L)x300(W)x280(H)mm
Peso	3.1 kg (vacío)
Capacidad	Cubo transparente de 10 L
Caudal de Agua	5 niveles, hasta 2 L/min
Tiempo de Terapia	Ciclo de tratamiento preestablecido de 30 minutos
Adaptador	Entrada AC 100–240V, AC 50/60 Hz, 500 mA máximo
Modo	Continuo
Potencia de Salida	12 W



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Paso 1: Preparar el cubo de hielo

- Llene el cubo de hielo transparente con hielo hasta la **línea de llenado**.
- Agregue agua fría hasta que alcance la **línea de llenado**.



Paso 2: Colocar la tapa

- Coloque la tapa sobre el cubo de hielo.
- Alinee el borde de la tapa con la ranura del cubo y presione la parte frontal hacia abajo para cerrarla y asegurarla correctamente.



Paso 3: Conectar las mangueras

- Humedezca ligeramente las boquillas de las mangueras antes de conectarlas.
- Asegúrese de que cada válvula esté desbloqueada **presionando hacia abajo** el seguro metálico en la parte superior de la válvula.
- Inserte completamente la boquilla de la manguera en el puerto del cubo de hielo hasta que escuche un **clic**, lo que indica que está correctamente bloqueada.
- Conecte la almohadilla de terapia fría de la misma manera: humedezca ligeramente las boquillas de la almohadilla, **presione** los seguros metálicos y inserte completamente las boquillas hasta que escuchen un **clic**.
- Verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar fugas o funcionamiento incorrecto.
- El dispositivo ahora está listo para crear un flujo continuo de agua fría desde el reservorio hasta la almohadilla de terapia.



Paso 4: Colocar la envoltura universal

- Kynorex ofrece una almohadilla de terapia fría universal diseñada para ajustarse a múltiples zonas del cuerpo.
- Coloque la almohadilla en hombros, zona lumbar, rodillas, tobillos u otras áreas objetivo según sea necesario.
- Ajuste las correas para asegurar un ajuste firme y seguro.
- Siempre coloque una barrera de humedad (por ejemplo, un paño delgado) entre la piel y la almohadilla para evitar congelación o irritación por frío.



• **Hombro**



• **Zona lumbar**



• **Rodilla**



• **Tobillo**

Paso 5: Conexión de energía

- Inserte el cable de alimentación en una toma de corriente funcional. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de conectar la manguera.
- Gire el interruptor junto al enchufe para encender la unidad.



INSTRUCCIONES DEL PANEL DE CONTROL



- **Ajustar flujo de agua:** Mantenga presionado el botón **M** hasta que parpadee "**LPM**". Use las **flechas** para ajustar el flujo (niveles 1–5).
- **Ajustar tiempo de terapia:** Mantenga presionado el botón **M** hasta que parpadee "**Min**". Use las **flechas** para ajustar la duración (minutos).
- Presione **M** nuevamente para confirmar.
- Iniciar terapia: Presione el botón **Start**. El icono de ventilador indica que el agua está circulando. Presione **Start/Stop** para finalizar la sesión.
- Add Ice: If the machine beeps three times, add more ice.

• ¿CÓMO DRENAR?



1. Retire completamente la tapa del cubo de hielo, asegurándose de que esté fuera del agua o hielo.
2. Encienda la máquina y sostenga la tapa sobre el cubo o el fregadero para recoger el agua que drena de la almohadilla y las mangueras.
3. Si es necesario, levante o gire suavemente la almohadilla de terapia fría para eliminar el agua restante.
4. Después del drenaje, guarde el dispositivo y la almohadilla de terapia fría en un lugar seco.



• CONTENIDO DEL PAQUETE



• Sistema de
Terapia Fría



• Tubo Aislante




• Almohadilla Fría
Universal



• Adaptador



• Bandas Elásticas
(S, M, L)

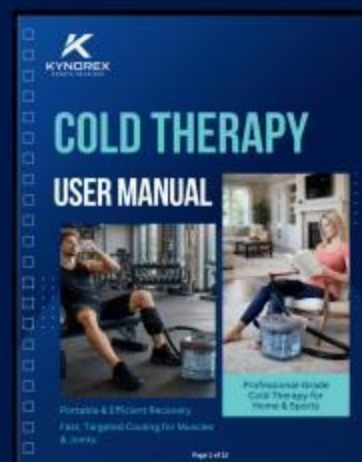

• Manual de
Usuario

• ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este dispositivo puede enfriarse a temperaturas extremas. Un uso incorrecto puede causar lesiones o molestias.

Para un uso seguro:

- Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evite el contacto prolongado directo con la piel; siempre use una barrera de humedad (por ejemplo, un paño fino).
- No utilice el dispositivo si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y seca.
- No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
- Evite usar el dispositivo en condiciones de alta humedad o cerca del agua para prevenir descargas eléctricas.
- Detenga el uso inmediatamente si experimenta molestias, dolor o reacciones inusuales.
- Duración de la terapia fría: comience con sesiones cortas (por ejemplo, 10–15 minutos) e incremente gradualmente si se siente cómodo. No exceda el ciclo recomendado de 30 minutos sin consultar a un entrenador, coach o fisioterapeuta calificado, familiarizado con su nivel de actividad y necesidades de recuperación.
- No deje el cold pad sobre el cuerpo sin supervisión.





Disponible en Todo el Mundo
Recupera de Forma Inteligente con KYNOREX

El sistema Kynorex Cold Therapy ayuda a tus músculos a recuperarse más rápido, reduce la fatiga y alivia las molestias después del deporte, entrenamientos o cualquier actividad física. Fabricado bajo estándares de calidad certificados y entregado de manera confiable en todo el mundo, Kynorex ofrece soluciones profesionales de recuperación en cualquier momento y lugar. KYNOREX — Tu socio de confianza en rendimiento y recuperación