


RODILLO PERCUSIVO MASAJEADOR



MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar nuestro producto. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

CONOZCA SU RODILLO MASAJEADOR

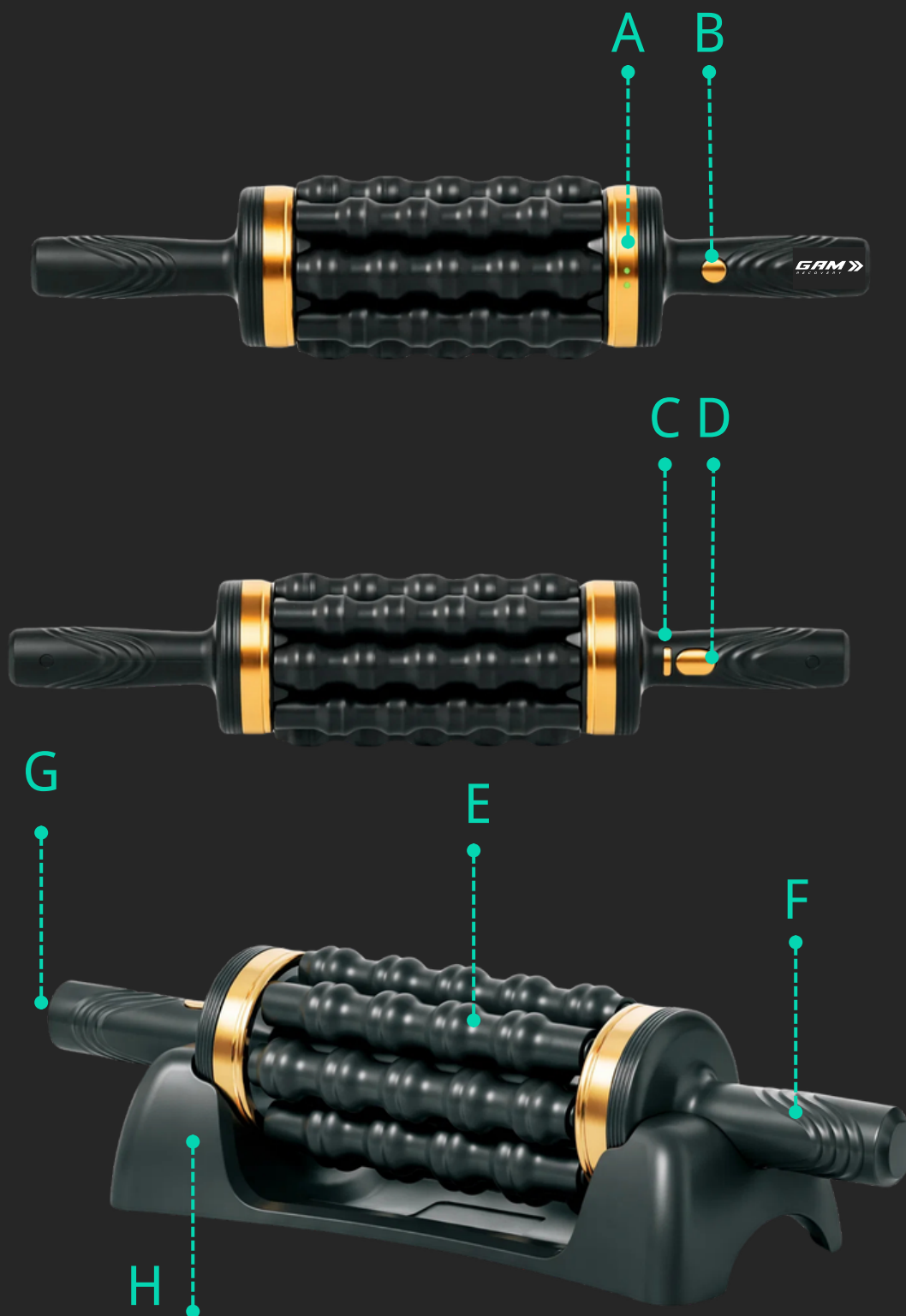



Partes:

- A. Luces indicadoras de encendido
- B. Botón de encendido
- C. Interruptor de avance/reversa
- D. Gatillo de inicio
- E. Rodillos de masaje
- F. Empuñaduras
- G. Puerto de carga
- H. Base de manos libres




Precaución:

Tenga cuidado al usar el dispositivo cerca de ropa suelta o cabello largo, ya que existe un pequeño riesgo de que se enreden.

CÓMO USAR



Mantener 2 s

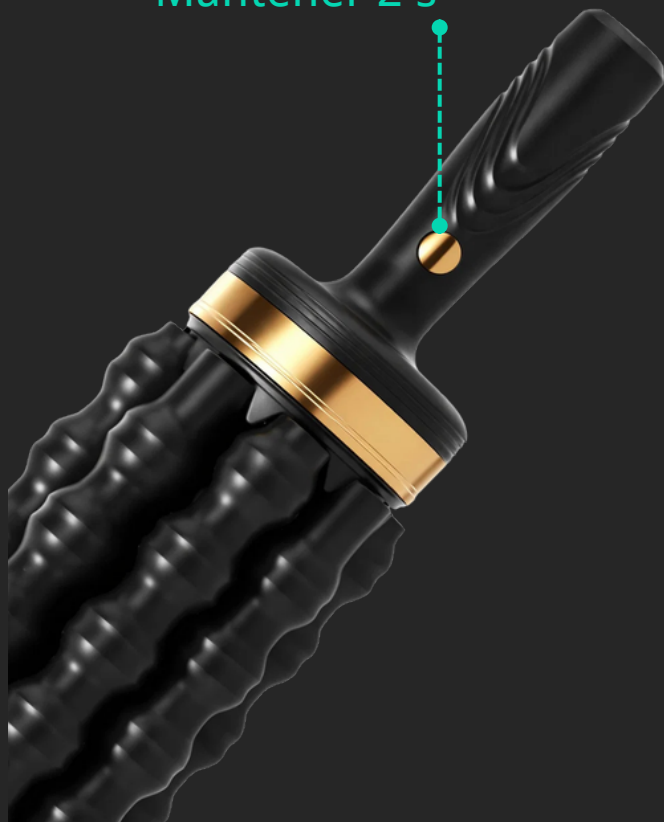

Paso 1

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido en la parte superior del mango durante aproximadamente 2 segundos.

Haga clic




Paso 2

- Cada pulsación corta del botón de encendido ajusta la velocidad (1–5) según lo indicado por las luces.
- Presionar dos veces rápidamente cambia al modo de rodado automático (no es necesario accionar el gatillo de inicio).



Mantener

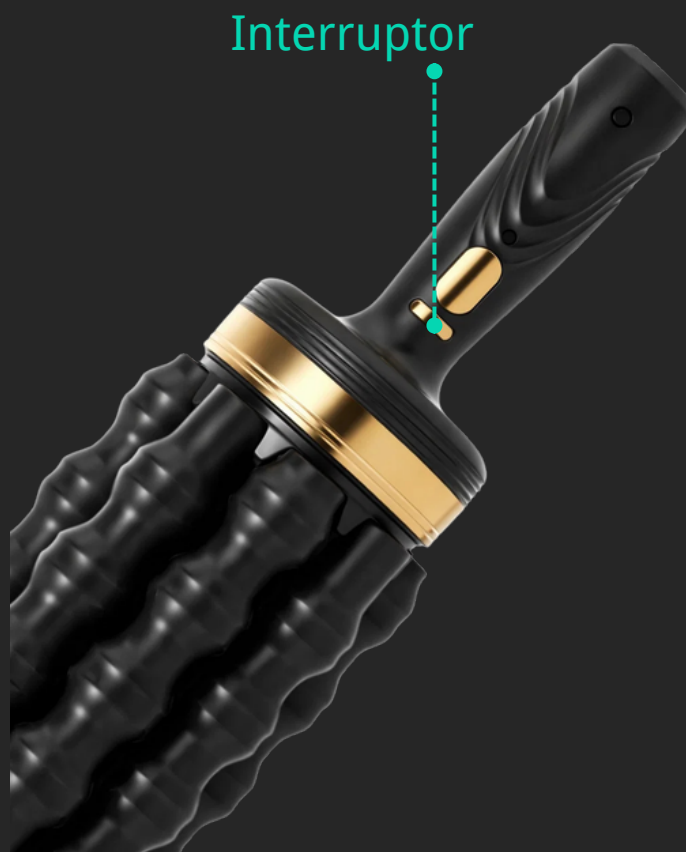

Interruptor

Paso 3


- Cuando esté listo para masajear, presione y mantenga el gatillo de inicio para comenzar a rodar. Suelte para detener.
- Durante el rodado automático, este botón no funcionará.

Paso 4

- Suelte el gatillo de inicio, cambie el interruptor de avance/reversa y vuelva a presionar el gatillo de inicio para cambiar de dirección.



Mantener 2 s

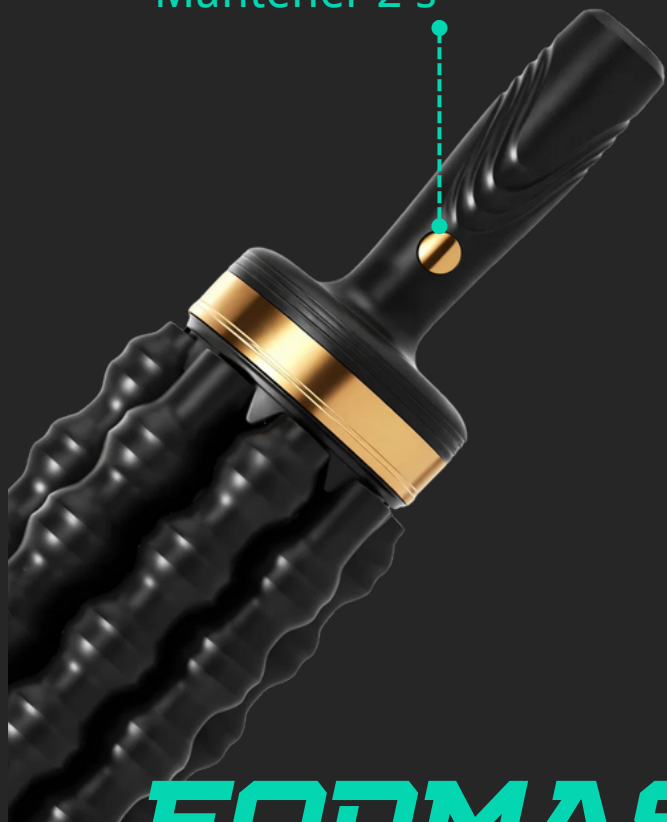

Paso 5

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido en la parte superior del mango hasta que el dispositivo se apague.

FORMAS DE USO

Manual

- Masajee los músculos doloridos de las piernas, glúteos, hombros y más. Usted controla la velocidad y la presión.





Manos Libres

- Coloque el rodillo en la base de manos libres, enciéndalo y apoye sus piernas, brazos o pies sobre él para aliviar la tensión muscular.



Usar en Pareja

- Como la mayoría de las cosas en la vida, ¡el rodillo es aún más divertido con un amigo! Las manos cansadas ya no son un obstáculo, ya que el rodillo facilita dar o recibir un masaje corporal completo.

Carga

- Para cargar el rodillo, simplemente conecte el cable incluido en el puerto de carga en el exterior del mango. Las luces indicadoras mostrarán el nivel de carga.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Modelo	PulseRoll-KY201
Niveles de velocidad	5 niveles
Velocidad de rotación	85 / 105 / 125 / 145 / 165 RPM
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Capacidad de la batería	2400 mAh
Tiempo de carga	Aprox. 320 min
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 270 min
Entrada de carga	USB Type-C, 5 V / 1 A o 2 A
Peso neto	1.8KG

ADVERTENCIAS



Antes de usar o cargar el masajedor:

Lea todas las instrucciones, advertencias y marcas de precaución en este manual, en el cargador y en el masajedor.

⚠ QUIÉN NO DEBE USAR ESTE MASAJEDOR

Edad:

Solo adultos mayores de 18 años. No usar por menores de 18.

Condiciones médicas:

No usar si tiene enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes con complicaciones, marcapasos, antecedentes de congelación, heridas abiertas, cirugía reciente, epilepsia u otros problemas de salud.

Embarazo:

No usar por encima de la cintura durante el embarazo.

⊘ ZONAS DEL CUERPO PROHIBIDAS

Cabeza y cara:

Nunca usar en la cabeza, cara ni cerca de los genitales.

Cuello y columna:

No usar por encima de la nuez de Adán ni de la vértebra C4.

Áreas lesionadas:

No usar en ninguna parte del cuerpo que tenga lesiones internas o externas existentes.



SEGURIDAD ELÉCTRICA Y USO DE AGUA



Mantener seco:

No mojar el masajeador. No usar cerca del agua. Limpiar solo con paño ligeramente húmedo o goma mágica.

No exposición al agua:

Nunca exponga el masajeador o el cargador al agua. No usar en, cerca o alrededor de agua (bañera, piscina, etc.).

Si cae en agua:

No intente alcanzarlo. Desenchufe inmediatamente.

Lugar de carga:

Solo cargar en interiores, en un lugar seco y bien ventilado. No cargar en baño, al aire libre ni cerca de fuentes de agua.

Ambientes explosivos:

No usar cerca de gas, polvo o materiales inflamables (chispas pueden causar incendio).



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cabello suelto / ropa:

Manténgase alejado de las partes móviles. Riesgo de enredos y lesiones.

Bloqueo de ventilaciones:

No bloquee las ventilaciones del motor. Mantenga libres de polvo, pelusa y cabello.

Debajo de mantas o almohadas:

No opere bajo mantas o almohadas (riesgo de sobrecalentamiento o incendio).

Desmontaje:

Nunca intente desmontar el dispositivo.

Uso solo según instrucciones:

Use únicamente como se describe en este manual. Solo emplee los accesorios recomendados.



TEMPERATURA Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento:

No almacenar a más de 40 °C / 104 °F (por ejemplo, luz solar directa, dentro del coche o edificios metálicos en verano).

Temperatura de carga:

Solo cargar entre 0 °C / 32 °F y 40 °C / 104 °F.

Si se siente caliente:

Si el masajeador se calienta durante el uso, detenga inmediatamente la operación.

Almacenamiento a largo plazo:

Cargue completamente antes de guardar por períodos prolongados.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

No quemar:

No queme ni incinere la batería (puede explotar y liberar gases tóxicos).

Quemaduras químicas:

Si la batería gotea: use guantes.

- Piel: lave con agua y jabón, luego enjuague con vinagre.
- Ojos: enjuague durante 20 minutos y busque atención médica.

Desecho:

Deseche según regulaciones locales. Antes de desechar, cubra el conector con cinta para evitar cortocircuitos.

No desarmar:

Desarmar puede causar choque eléctrico, incendio o exposición a químicos.



CUIDADO DEL CARGADOR Y CABLE

Desenchufe correctamente:

Tire del enchufe, no del cable. No transporte el cargador por el cable.

Evitar daños:

Mantenga el cable alejado de calor, aceite y bordes afilados. No use cables dañados.

Desenchufe cuando no se use:

Desenchufe el cable si no va a usarlo por períodos prolongados.

No sobrecargar:

No deje conectado al cargador más de 1 hora después de carga completa.

Manos húmedas:

No manipule el cargador ni el masajeador con las manos húmedas.



LIMITADOR TÉRMICO

El masajeador incluye un limitador térmico de reinicio automático que lo apaga para prevenir sobrecalentamiento o incendio. Si se siente caliente durante el uso, detenga la operación inmediatamente.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar ni prevenir ninguna enfermedad. Si experimenta incomodidad o dolor, deje de usarlo inmediatamente. Aunque es poco

RODILLO PERCUSIVO MASAJEADOR



Gimnasios y Estudios
Modernos

Clínicas Deportivas y
Centros de Rehabilitación

Entrenadores Personales y
Coaches

Zonas de Recuperación
para Atletas



DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO

GAM Recovery brinda recuperación
rápida y soporte confiable a tus
clientes.

GAM >>
RECOVERY