

GAM Recovery Pistola de Masaje

Modelo: PulseMG-KY106



Manual de Usuario

Lea este manual cuidadosamente antes de usar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas instrucciones cuidadosamente:

1. Uso Adecuado

- Solo para uso de adultos.
- Utilice sobre piel seca y limpia o ropa. Aplique suavemente, moviéndose por cada área durante ~60 segundos.
- Solo sobre tejidos blandos; evite dolor o incomodidad.



2. Zonas Prohibidas

- No usar en cabeza, huesos o áreas duras.
- Use únicamente el accesorio que mejor se adapte a sus necesidades.
- Puede ocurrir moretones independientemente de los ajustes. Revise las áreas con frecuencia y deténgase al primer signo de molestia.
- Mantenga los dedos, cabello y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles y la parte trasera del aplicador.



3. Cuidado del Dispositivo

- No introduzca objetos en los orificios de ventilación.
- No sumerja en agua ni permita que el agua entre en los orificios de ventilación.
- No deje caer ni haga un uso indebido del dispositivo.
- Verifique el estado del dispositivo y la batería antes de cada uso.
- No manipule ni altere la pistola de masaje.
- Nunca deje el dispositivo funcionando o cargando sin supervisión.



ADVERTENCIA

Consulte a su médico antes de usar la pistola de masaje o cualquier dispositivo de vibración si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

- Embarazo, diabetes con complicaciones (neuropatía o daño retiniano), uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias de disco, condiciones de la columna (espondilolistesis, espondilólisis, espondilosis), reemplazos recientes de articulaciones o DIU, clavos o placas metálicas, o cualquier preocupación de salud.
- Las personas frágiles y los niños deben ser supervisados por un adulto.

Estas contraindicaciones no impiden automáticamente el uso, pero se recomienda consejo médico.

La investigación continua podría reducir la lista de contraindicaciones en el futuro.

El ejercicio con vibración puede integrarse en un plan de tratamiento bajo la guía de un médico o fisioterapeuta.


NOTA: Cualquier ejercicio o terapia, incluyendo este dispositivo, puede causar lesiones. Consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.



Embarazo



Diabetes Complicada

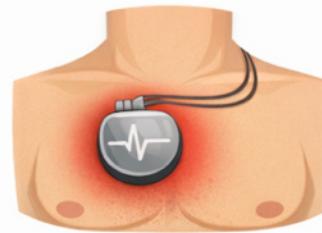

Marcapasos



Problemas de Columna



**Cirugías Recientes /
DIU o Implantes Metálicos**



Epilepsia o Migrañas


CARACTERÍSTICAS

La pistola de masaje muscular alivia la rigidez y el dolor muscular. Ideal para aliviar el dolor de hombros, cuello, cintura y espalda, esta pistola es la solución para músculos relajados y confortables. Incluye 10 cabezales de masaje diferentes para una experiencia cómoda. La pistola es compacta, portátil y ultra silenciosa; con 10 velocidades ajustables que permiten aplicar la presión adecuada para aliviar el dolor y mejorar la fuerza, flexibilidad y coordinación muscular.

Mediante el golpeteo rítmico del cabezal sobre los músculos, ayuda a acelerar la recuperación de los atletas tras entrenamientos intensos y facilita el alivio del estrés, ansiedad, dolor o tensión muscular.

La pistola de masaje ayuda a:

- Mejorar moretones, esguinces, distensiones y dolores musculares
- Aumentar la circulación sanguínea y el flujo linfático
- Aliviar calambres y rigidez muscular
- Reducir la acumulación de ácido láctico en los músculos
- Activar el sistema nervioso y los músculos
- Estirar suavemente los músculos
- Incrementar la movilidad articular
- Relajar y mejorar la flexibilidad del tejido conectivo y la fascia

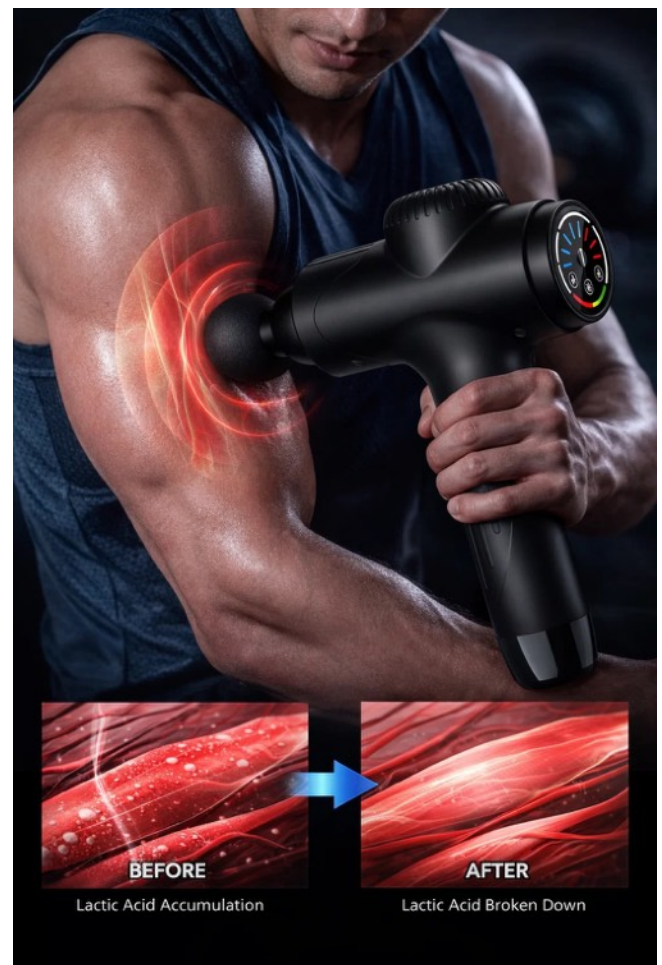

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	PulseMG-KY106
Amplitud	6mm
Cabezal de masaje	10
Ruido de funcionamiento	≤50dB
Capacidad de la batería	1500mAh
Tiempo de carga	Aproximadamente 3-4 horas
Velocidad del motor	1700-2700RPM
Carga	USB Type-C
Tiempo de funcionamiento	2–5 h (dependiendo del nivel de velocidad)
Niveles de velocidad	10
Peso neto	1.4 KG

Contenido del paquete:

- 1 x Pistola de masaje
- 1 x Manual de usuario
- 10 x Cabezal de masaje
- 1 x Estuche portátil

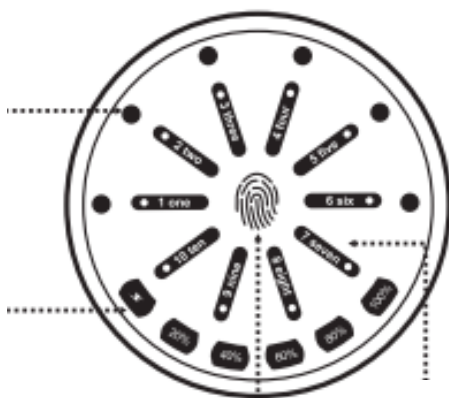


DIAGRAMA DEL PRODUCTO Y FUNCIONES




Indicador de Presión

Indicador de Energía



Indicador de Velocidad

Inicio

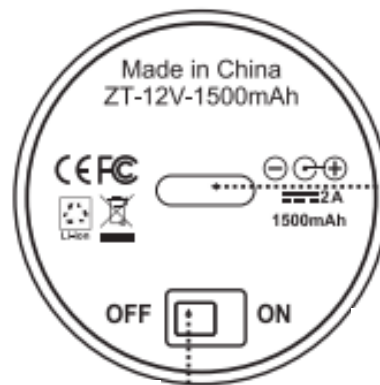

Puerto de Carga

Interruptor de Encendido/ Apagado

CABEZAS DE MASAJE



Cabezal Redondo

Relaja grupos musculares grandes: espalda, pecho y piernas



Cabezal en Forma

Relaja isquiotibiales y glúteos



Cabezal Pala

Relaja músculos abdominales y lumbares



Cabezal Codo

Relaja plantas de pies y palmas



Cabezal Plano

Relaja músculos en todo el cuerpo



Cabezal en U

Relaja columna cervical, hombros y tendones de Aquiles



Cabezal Bala

Alivia dolor profundo de tejidos



Cabezal Convexo

Relaja glúteos y músculos sensibles



Cabezal Abultado

Relaja músculos de brazos, piernas y glúteos



Cabezal en Y

Relaja músculos de brazos y piernas

CARGA

- Se recomienda usar un adaptador de carga de 5V 2A para cargar la pistola de masaje.
- Cargue completamente la pistola de masaje antes del primer uso.
- Conecte el cable de carga USB al puerto de carga.
- La batería se puede recargar en cualquier momento o nivel de carga.
- La batería no debe descargarse completamente antes de recargar.
- El nivel de carga de la batería se indica en la parte inferior de la pantalla LED.
- Por su seguridad, nunca encienda la pistola mientras está cargando.
- Por protección de seguridad, la pistola de masaje no se puede encender durante la carga; solo funciona correctamente cuando la carga se ha completado y está desconectada del adaptador.



AVISO: Al usar aparatos eléctricos, siempre observe las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Verifique que la fuente de energía corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de calificación del dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Use un paño ligeramente húmedo y luego seque con un paño suave para limpiar suavemente la superficie exterior. Asegúrese de apagar la pistola de masaje antes de limpiar.
- No intente limpiar superficies internas: la limpieza no requiere desmontar el dispositivo. Desmontar el mecanismo interno podría causar fallas en el dispositivo.
- Apague el dispositivo y guárdelo en la caja suministrada si no lo va a usar por mucho tiempo o durante viajes.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, líquidos y niños.

INSTRUCCIONES DE LOS CABEZALES DE MASAJE

1. **Colocar:** Según sus necesidades, elija un cabezal de masaje adecuado y gírelo firmemente en la pistola de masaje. (Fig.7)
2. **Retirar:** Si desea quitar el cabezal de masaje, gírelo para aflojarlo y luego extráigalo del dispositivo. (Fig.8)

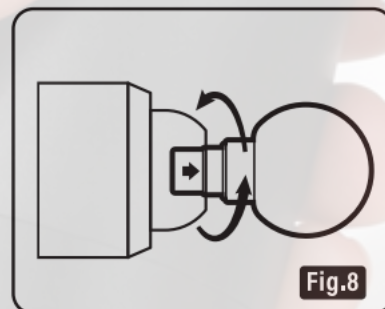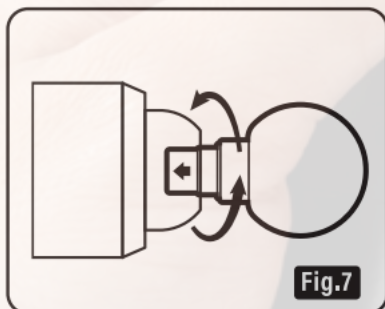

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Esta tabla muestra cómo resolver problemas al usar la pistola de masaje. Siga las instrucciones a continuación:

¿Por qué mi pistola de masaje no se enciende?	1. Hay un interruptor de Encendido/ Apagado (ON/OFF) en la parte inferior del mango. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición ON. 2. Verifique el estado de la batería y cargue el dispositivo durante 6 horas antes del primer uso.
¿Por qué el producto se detiene durante el masaje?	1. La pistola de masaje tiene una función de apagado automático a los 10 minutos. Por favor, no masajee demasiado tiempo en la misma zona del cuerpo, ya que podría causar moretones. 2. Reinicie la unidad presionando nuevamente.
¿Qué tan fuerte debo presionar la pistola de masaje sobre mis músculos?	1. Lo mejor es encender el dispositivo alejado del cuerpo. Una vez en funcionamiento, coloque el cabezal de masaje sobre el cuerpo y permita que se deslice suavemente sobre los tejidos. 2. Cuando sienta la presión deseada, puede aumentarla lentamente hasta encontrar un nivel cómodo y equilibrado.
¿Se detiene la pistola de masaje al aplicar presión sobre el cuerpo?	1. Reinicie la pistola de masaje. Si el reinicio no soluciona el problema, póngase en contacto con el equipo de soporte de GAM Recovery para un reemplazo.

GARANTÍA

Si dentro de **un año desde la fecha de compra** este producto presenta fallas debido a un defecto de **material o mano de obra**, repararemos o reemplazaremos el producto, o los componentes necesarios, **sin cargo**.

Esta garantía no cubre:

- Daños causados por accidente, mal uso, manipulación incorrecta, etc.
- Unidades sometidas a reparaciones no autorizadas.
- Unidades que no se usan de acuerdo con nuestras instrucciones.
- Daños que excedan el costo del producto.
- Deterioro del producto entregado como resultado de condiciones de almacenamiento o protección anormales por parte del cliente.



Fuerza. Inteligencia. Velocidad.