

Kynorex Botas de Compresión

Lite Series



Manual de Usuario

Lea este manual cuidadosamente antes de usar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1 **Uso General**

- Este producto es solo para uso personal y no es un instrumento médico ni para uso comercial.
- Use el producto solo para el propósito descrito en el manual.
- El producto está diseñado para el uso de una sola persona a la vez.
- Los niños o personas sin experiencia deben ser supervisados por un adulto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de bebés, niños y personas que no puedan usarlo de manera independiente.



2 **Adaptador de Corriente y Seguridad Eléctrica**

- No rasque, dañe, doble, tire o retuerza el cable de alimentación.
- Siempre sujete el enchufe al enchufar o desenchufar.
- Use únicamente el adaptador original; no use otros adaptadores.
- No enchufe ni desenchufe el adaptador con las manos húmedas.



3 Seguridad en el Uso del Producto

- No toque el producto con objetos afilados.
- No use el producto bajo mantas, almohadas u otras coberturas; asegúrese de una adecuada disipación de calor para evitar sobrecalentamiento, incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- No use el producto en áreas con sustancias corrosivas ni durante la administración de oxígeno.
- No use el producto en ambientes de alta humedad o alta temperatura.
- No use el producto mientras conduce.
- No camine mientras usa el producto.
- Detenga el uso inmediatamente si experimenta incomodidad o dolor intenso.
- No use el producto si el cable de alimentación está dañado, si el producto funciona incorrectamente, ha sido caído o ha entrado en contacto con agua.



4 Consulte a un Médico Antes de Usar

Consulte a un médico antes de usar este producto si se aplica alguna de las siguientes condiciones:

- Durante el embarazo, la menstruación o poco tiempo después del parto.
- Dispositivos médicos electrónicos implantados (por ejemplo, marcapasos).
- Trastornos de circulación sanguínea o trombosis.

- Osteoporosis.
- Infecciones cutáneas.
- Enfermedades cardíacas.
- Heridas o afecciones en la piel.
- Tumores malignos.
- Discapacidades físicas, déficits sensoriales o neurológicos, o falta de experiencia/sentido común (incluyendo niños con enfermedad mental o parálisis física).
- Recibiendo tratamiento médico, o cualquier contraindicación que requiera control médico.
- Fracturas o dislocaciones óseas en o cerca del sitio de aplicación.
- Neuropatía periférica grave o alteraciones sensoriales causadas por diabetes.



Mantenimiento y Almacenamiento

- No modifique, desmonte ni repare el producto sin autorización.
- Después de usar, guarde el producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa.
- Desenchufe el producto cuando no esté en uso.
- Mantenga el producto limpio utilizando una toalla suave y seca.



Lista de Contenido del Paquete



Kynorex Botas de
Compresión x 1



Bolsa de
Transporte x 1




Adaptador x 1



Manual de Usuario
x 1

Unidad de Control

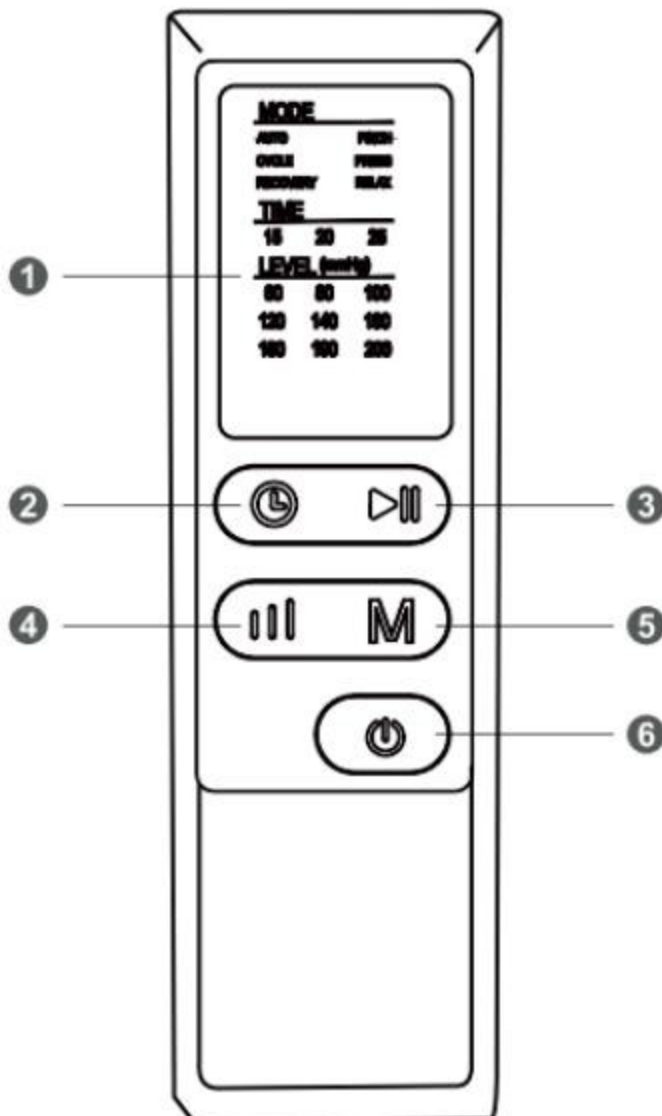

1 Pantalla de Visualización

2 Botón de Temporizador

3 Botón de Pausa

4 Botón de Intensidad

5 Botón de Modo

6 Botón de Encendido

● FUNCIONES DE LOS BOTONES

- ① **Botón de Encendido (Power Button)**
Presione brevemente para encender o apagar el dispositivo.
- ② **Botón de Modo (Mode Button)**
Con el dispositivo encendido, presione brevemente para cambiar de modo. Hay 6 modos de masaje:
AUTO - CYCLE - RECOVERY - PINCH - PRESS - RELAX
(AUTO – CICLO – RECUPERACIÓN – PINZAMIENTO – PRESIÓN – RELAJACIÓN)
- ③ **Botón de Pausa (Pause Button)**
Presione este botón en cualquier modo para pausar la inflación y mantener la presión. Presione nuevamente para reanudar la operación de inflación.
- ④ **Botón de Intensidad (Intensity Button)**
Hay 9 niveles de intensidad, presión de compresión de aire:
60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 190 – 200 mmHg
Presione brevemente para cambiar los niveles de intensidad.
- ⑤ **Botón de Temporizador (Timer Button)**
Hay 3 opciones de tiempo. Presione este botón para elegir:
15 min / 20 min / 25 min.




NOTA

Este producto cuenta con una función de memoria de estado: el dispositivo recordará el estado de funcionamiento actual (presión de aire, modo y nivel) después de encender la máquina. Estos valores se convertirán en la configuración predeterminada al reiniciar el dispositivo la próxima vez.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar el masajeador de piernas no más de una hora al día.


Kynorex Botas de Compresión

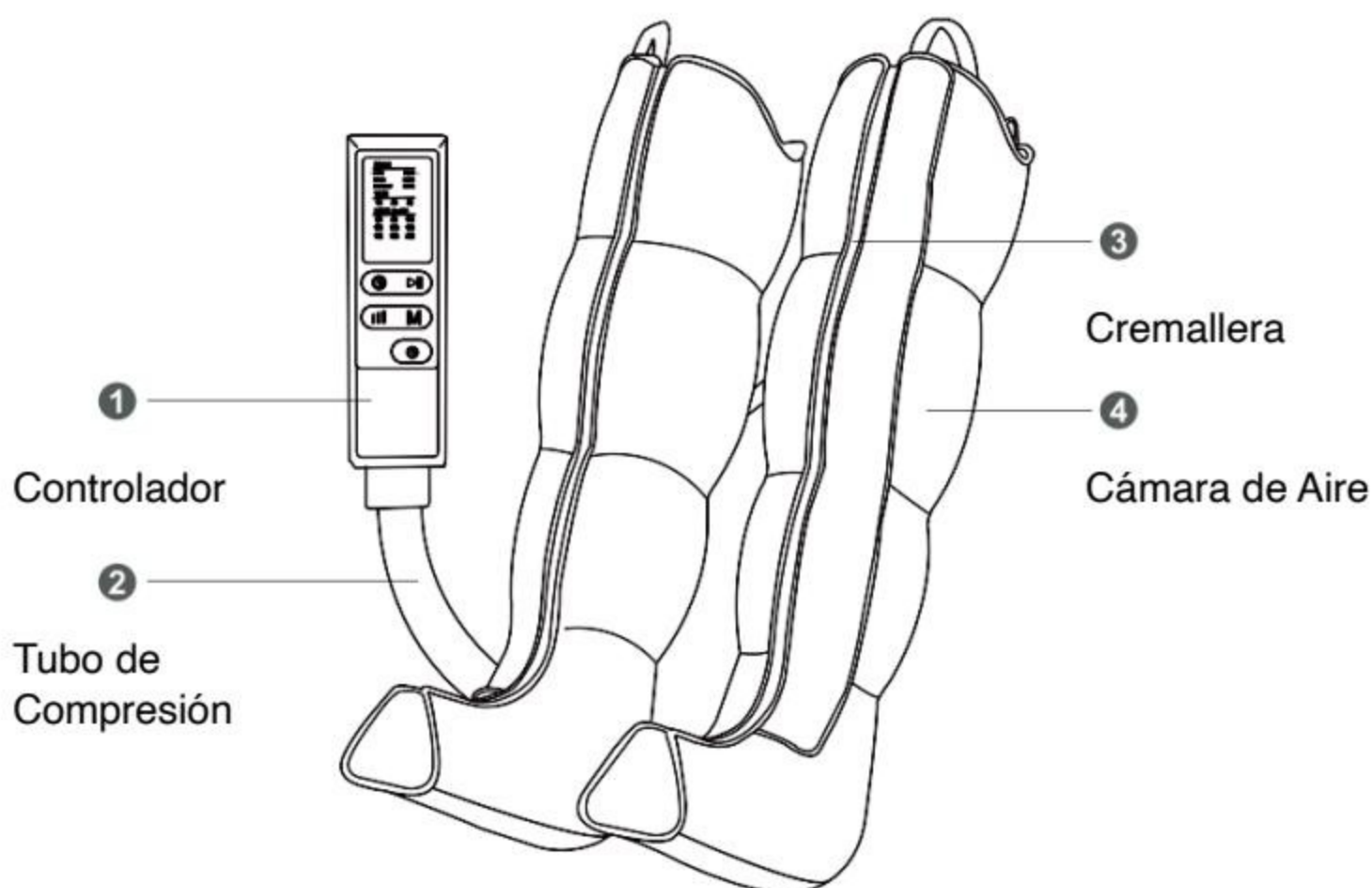

Instrucciones de Operación

Por favor, lea cuidadosamente las precauciones de seguridad antes de usar el producto.

Para obtener un mejor masaje, utilícelo de acuerdo con estas instrucciones.

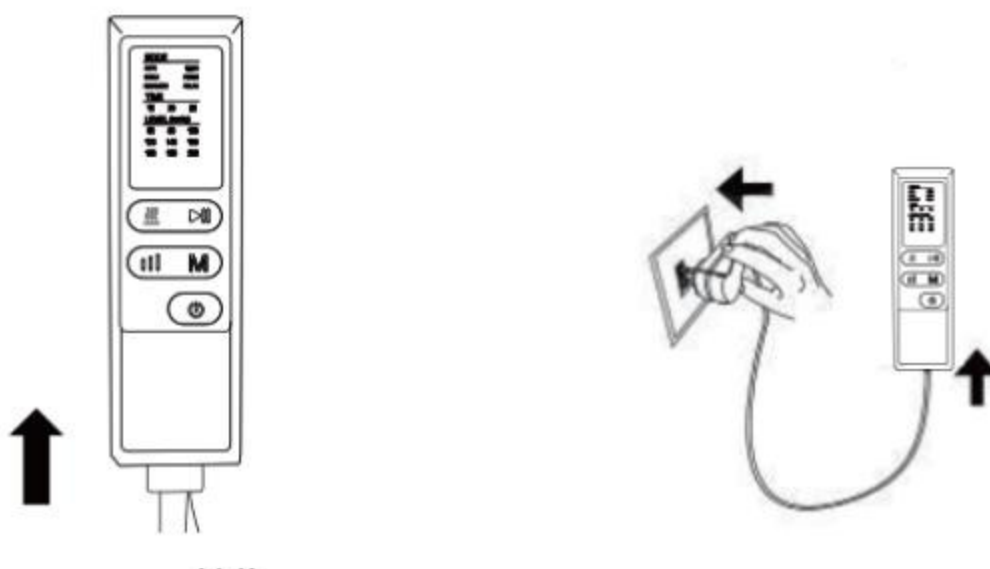

① **Conecte la manguera al control**

Ambos tubos (mangas) deben estar conectados para que el dispositivo funcione correctamente.

② **Conecte el adaptador**

Enchufe bien el adaptador a la toma de corriente y al control; la pantalla parpadeará durante 1 segundo.

③ **Coloque las mangas en las piernas**

Asegúrese de que las mangas estén correctamente posicionadas sobre sus piernas.

④ **Adopte una posición cómoda**

Puede estar sentado, reclinado o acostado. Presione el Botón de Encendido para iniciar.

⑤ **Seleccione modo, intensidad y tiempo**

Puede cambiar libremente el modo de masaje, los niveles de intensidad y la duración hasta encontrar la configuración que más le convenga, y luego disfrutar del masaje.

(El producto cuenta con función de memoria: recordará la presión, el modo y el tiempo utilizados en el último uso y los conservará como predeterminados para la próxima sesión).

⑥ **Apagado automático**

El dispositivo se apagará automáticamente al finalizar el tiempo de tratamiento. Puede presionar el botón si desea continuar o finalizar el masaje antes de tiempo.


Se recomienda usar 2 veces al día (por ejemplo, 40 minutos en total).

⑦ **Después del uso**

Desconectar la manguera de aire puede causar un desinflado rápido.

Cómo Elegir un Modo de Masaje

Mode / Modo	Función	Recomendaciones de Uso
M1/ AUTO	AUTO: Calentamiento, activación ligera	Usar antes del entrenamiento, circulación ligera
M2/ CYCLE	CICLO: Compresión parcial alterna	Adecuado para piernas cansadas o después de periodos prolongados sentado
M3/ RECOVERY	RECUPERACIÓN: Compresión secuencial	Recuperación rápida post-entrenamiento, eliminación de ácido láctico
M4/ PINCH	Compresión focal	Alivio localizado de fatiga en la pantorrilla
M5/ PRESS	Doble ola, compresión alterna de dos segmentos	Recuperación profunda, tras entrenamientos largos o intensos
M6/ RELAX	Compresión total de la pierna	Mejora la circulación, recuperación de toda la pierna

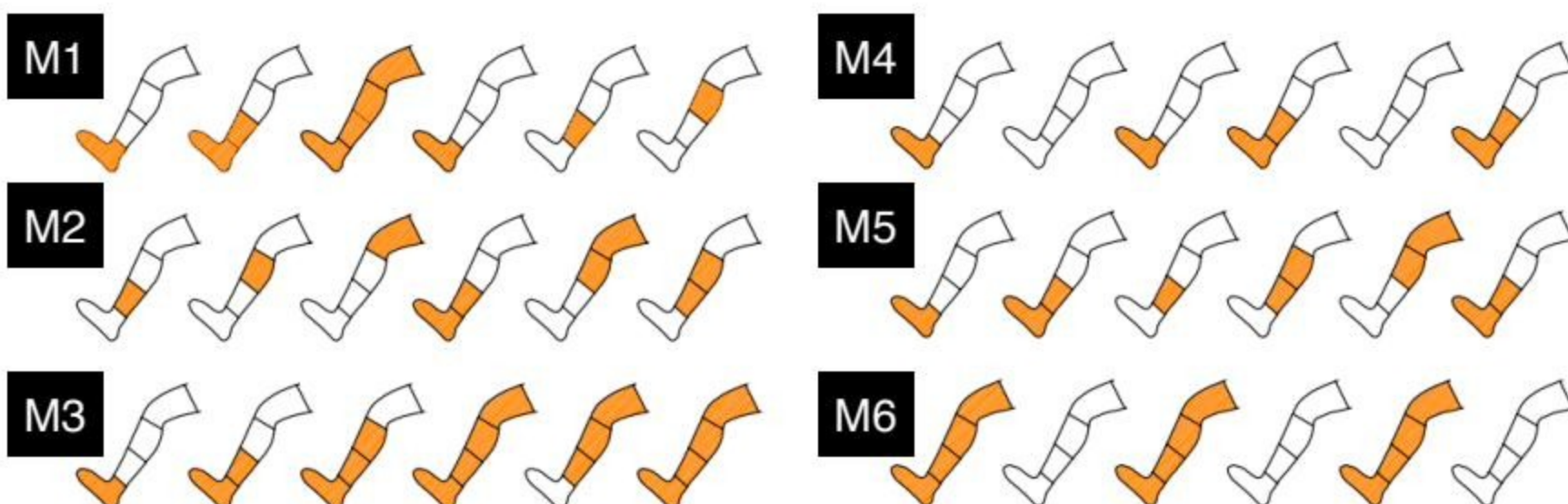



Especificaciones del Producto



Modelo Model	Kynorex Lite KY404
Presión Pressure	60-80-100-120-140-160-180-190-200 mmHg
Temporizador Timer	15 / 20 / 25 min
Entrada Input	12V / 2A
Potencia Rated Power	24 W
Inseam Length Longitud de la entrepierna	88 cm (34.64 in)
Upper Thigh Circumference Circunferencia del muslo superior	80 cm (31.49 in)
Peso Product Weight	3 KG



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Limpie la unidad de control, las mangas y las mangueras con un paño limpio y ligeramente húmedo.
- Seque completamente todas las partes con un paño suave antes de usar.
- No permita que polvo, pelusa u objetos extraños entren en las mangueras o conectores.
- Si se acumula polvo, limpie suavemente con un paño seco antes de su uso.
- No utilice gasolina, alcohol, disolventes u otros productos químicos agresivos. Pueden causar daños, decoloración o fallos en el equipo.
- No limpiar en seco.
- Deseche el producto de acuerdo con la normativa local de protección ambiental.





No funciona y la pantalla está apagada

Posibles causas

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">❶ El dispositivo no está encendido.❷ El adaptador no está correctamente conectado.❸ La toma de corriente no funciona. | <ul style="list-style-type: none">❶ Presione el botón de encendido para activar la unidad de control.❷ Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado tanto a la unidad como a la toma de corriente.❸ Verifique que la toma de corriente funcione correctamente. |
|---|---|



La pantalla está encendida, pero las mangas no funcionan

Posibles causas

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❶ Solo una manga está conectada a la manguera de aire.❷ Las mangueras no están correctamente conectadas.❸ Las mangas pueden estar dañadas. | <ul style="list-style-type: none">❶ El dispositivo funciona correctamente solo cuando ambas mangas están conectadas.❷ Verifique que las mangueras estén correctamente insertadas.❸ Revise si hay fugas de aire; en caso de daño, contacte con el proveedor. |
|--|---|



El dispositivo se detiene durante el funcionamiento o deja de bombear

Posibles causas

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❶ Las mangueras no están correctamente conectadas.❷ El adaptador de corriente se ha desconectado.❸ El tiempo programado ha finalizado. | <ul style="list-style-type: none">❶ Verifique que las mangueras estén bien conectadas.❷ Asegúrese de que el adaptador esté correctamente conectado.❸ El dispositivo se detiene automáticamente al finalizar el tiempo programado. Presione el botón de encendido para iniciar una nueva sesión si es necesario. |
|--|---|



Disponible en Todo el Mundo

Recuperación Inteligente con KYNOREX

Los sistemas de compresión **KYNOREX** están diseñados para apoyar la recuperación muscular y mejorar la circulación después del entrenamiento.

Fabricados bajo estándares de calidad certificados y con suministro global confiable, ofrecemos soluciones profesionales para rendimiento y recuperación.

KYNOREX — Su socio de confianza en recuperación.